

THERA GO

Gama de ortóteses
funcionais terapêuticas



3 Conceitos básicos e o desenvolvimento da Thera Go®

7 Gama Thera Go®

8 Membro inferior

16 Membro superior

22 Visão geral da gama


24 Suportes de marketing



Conceitos básicos

TERAPIA Funcional

Encontrar soluções para novas tendências em reabilitação de trauma e lesões crônicas é essencial na Orliman®. Diversos estudos mostram que a reabilitação é muito mais rápida com mobilização precoce, além de garantir um maior grau de satisfação do paciente. As órteses funcionais são projetadas para melhorar a função neuromuscular, melhorar o equilíbrio estático e dinâmico e reduzir a probabilidade de lesões repetidas.

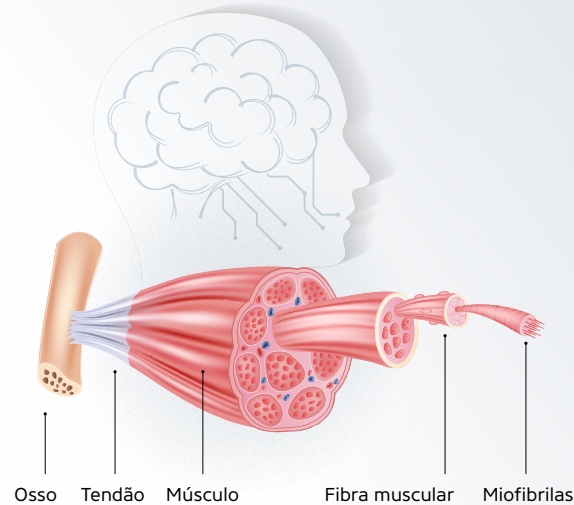

COMPRESSÃO Efetiva

A compressão multidirecional evita a acumulação de líquidos, reduz o stress nos tecidos moles e estimula os receptores sensoriais proprioceptivos, melhorando a função articular e a coordenação muscular. Por outro lado, otimiza a circulação sanguínea e facilita a regulação da temperatura corporal.



DESIGN Estético

O design moderno desta gama é inspirado nas estruturas anatómicas de cada segmento do corpo. O uso de formas orgânicas proporciona aos pacientes uma sensação de movimento e proteção.



REABILITAÇÃO Dinâmica


A imobilização prolongada ou desnecessária leva a uma maior restrição funcional e, portanto, a uma maior rigidez na articulação ou tecido lesionado. A gama Thera Go® foi pensada para facilitar a recuperação funcional dos pacientes. Desenvolvida em colaboração com profissionais de saúde, o uso de ortóteses Thera Go® prepara idealmente os pacientes para a sua vida quotidiana e para a prática desportiva.

O Desenvolvimento da Thera Go®


TECIDO CONFORTÁVEL E RESISTENTE

O tecido é composto por uma combinação de filamentos elásticos e não-elásticos para uma reabilitação funcional e eficaz.


- 1 Elastómero de elevada compressão
- 2 Multi-filamento suave
- 3
- 4

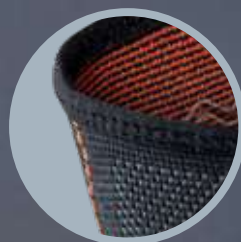

Extremidades reforçadas para adaptação anatómica, prolongando assim a vida útil do produto.

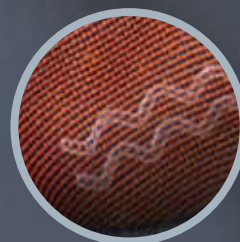

Pontos em silicone no interior para evitar a deslocação do suporte durante a atividade.

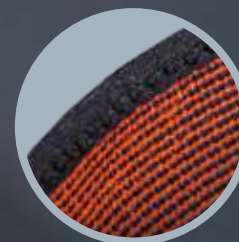

As costuras foram minimizadas no interior para uso confortável sem atritos incômodos.



Suporte terapêutico



Tecido fino e leve



Elevada respirabilidade



Latex-free

DETAHES TÉCNICOS PARA UMA RECUPERAÇÃO CONTROLADA

As almofadas viscoelásticas aplicam um efeito de micro-massagem que promove a reabsorção de edema durante o movimento.



TGO340




TGO480



TGO490

Os componentes rígidos garantem a estabilização adequada da articulação e atividade funcional controlada.

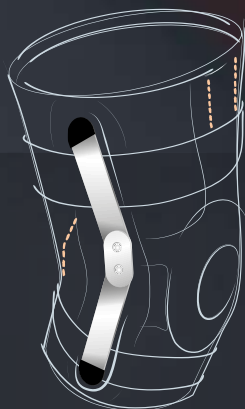


TGO487




TGO350

As bandas de ajuste regulam com precisão a aplicação de forma evolutiva e personalizada. Adaptam-se a cada fase da reabilitação.

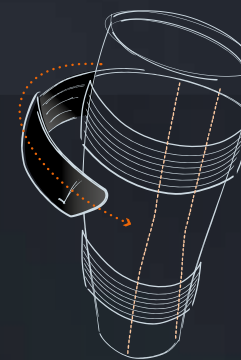

TGO484

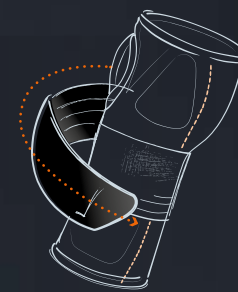

TGO350



Gama Thera Go®

MEMBRO INFERIOR

Joelheira elástica funcional com barras laterais flexíveis



TGO480

pg. 10

Joelheira elástica funcional com articulações



TGO487

pg. 12

Coxa elástica funcional



TGO481

pg. 14

Perneira elástica funcional



TGO484

pg. 15

Pé elástico funcional



TGO490

pg. 16

MEMBRO SUPERIOR

Suporte de ombro elástico funcional



TGO330

pg. 18

Cotoveleira elástica funcional



TGO340

pg. 20

Pulso elástico funcional



TGO350

pg. 22



Joelheira elástica funcional com barras laterais flexíveis




TAMANHOS cm	CNP
1 A: 41-44 B: 31-34	6627463
2 A: 44-47 B: 34-37	6627471
3 A: 47-50 B: 37-40	6627489
4 A: 50-53 B: 40-43	6627521
5 A: 53-56 B: 43-46	6627539

Efeitos

- Estabilização do joelho, proteção e compressão.
- Melhor propriocepção.

Indicações

- Instabilidade patelar.
- Derrame e edema causados por artrose e artrite.
- Fibromialgia.
- Entorses e contusões.
- Irritação pós-operatório e pós-trauma.

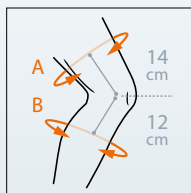

31
cm Altura

B Bilateral





TECIDO FINO E LEVE



COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



ELEVADA RESPIRABILIDADE




SUPORTE TERAPÊUTICO



Estabilizadores em espiral para um melhor controlo mediolateral.

Impedindo também a deformação da joelheira durante o movimento.

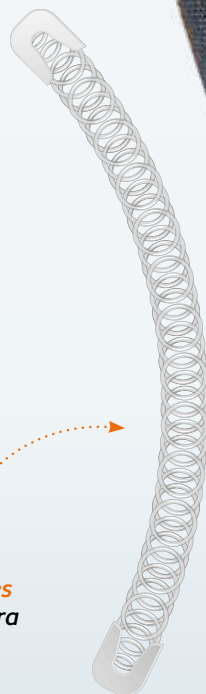

Almofada viscoelástica rotuliana com proteção reforçada na tíbia e alívio de pressão do tendão rotuliano.

Permite o controlo adequado da zona da rótula e os pontos de alívio aplicam um efeito de micro-massagem que promove a reabsorção de edema durante o movimento do joelho.



Joelheira elástica funcional com articulações




TAMANHOS cm	CNP
1 : A: 39-42 B: 29-32	6627547
2 : A: 42-45 B: 32-35	6627554
3 : A: 45-48 B: 35-38	6627562
4 : A: 48-51 B: 38-41	6627570
5 : A: 51-54 B: 41-44	6627588

• Efeitos

- Estabilização do joelho, proteção e compressão.
- Melhor propriocepção.

• Indicações

- Instabilidade patelar e mediolateral.
- Lesões dos meniscos.
- Derrame e edema causados por artrose e artrite.
- Fibromialgia.
- Entorses e contusões.
- Irritação pós-operatório e pós-trauma.

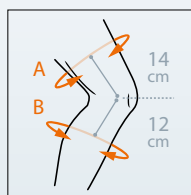

31
cm Altura

B Bilateral





TECIDO FINO E LEVE




COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



ELEVADA RESPIRABILIDADE



SUPOORTE TERAPÊUTICO

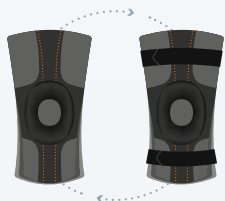

SUPOORTE

EVOLUTIVO

3 graus de estabilização

Inclui **articulações policêntricas** removíveis para estabilização, acompanham o movimento e impedem a hiperextensão do joelho.



Bandas rígidas removíveis para ajuste de compressão e para aliviar pressão na zona do joelho.

Almofada viscoelástica rotuliana com proteção reforçada na tíbia e alívio de pressão do tendão rotuliano.

Permite o controlo adequado da zona da rótula e os pontos de alívio aplicam um efeito de micro-massagem que promove a reabsorção de edema durante o movimento do joelho.



Coxa elástica funcional



TAMANHOS cm	CNP
1 40-44	6627927
2 44-48	6627935
3 48-52	6627943
4 52-57	6627950
5 57-62	6627968





Inclui **bandas elásticas removíveis** para ajuste de compressão, estimulando a circulação sanguínea e aliviando pressão na zona afetada.

Efeitos

- Suporte e compressão para os músculos da coxa.
- Redução de edema em músculos lesionados.
- Melhor propriocepção.

Indicações

- Tensão muscular e contusões.
- Estiramentos e roturas musculares.
- Irritação pós-trauma.

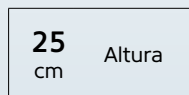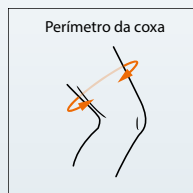

TECIDO FINO E LEVE




ELEVADA RESPIRABILIDADE



COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



SUPORTE TERAPÊUTICO

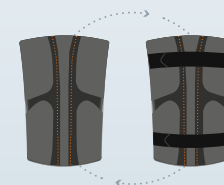

SUPORTE EVOLUTIVO
2 graus de estabilização

Perneira elástica funcional




TAMANHOS cm	CNP
1 27-29	6627877
2 29-32	6627885
3 32-36	6627893
4 36-40	6627901
5 40-45	6627919

Efeitos

- Suporte e compressão para os músculos da barriga da perna.
- Redução de edema em músculos lesionados.
- Melhor propriocepção.

Indicações

- Tensão muscular e contusões.
- Estiramentos e roturas musculares.
- Irritação pós-trauma.

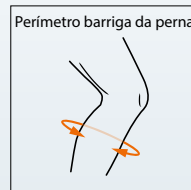

25
cm Altura

B Bilateral



TECIDO FINO E LEVE



ELEVADA RESPIRABILIDADE




COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



SUPORTE TERAPÊUTICO

Inclui **bandas elásticas removíveis** para ajuste de compressão, estimulando a circulação sanguínea e aliviando pressão na zona afetada.

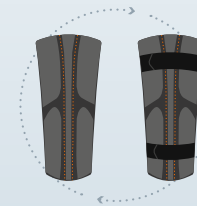

SUPORTE EVOLUTIVO
2 graus de estabilização

Pé elástico funcional



TAMANHOS cm	CNP
1 19-21	6627828
2 21-23	6627836
3 23-25	6627844
4 25-27	6627851
5 27-29	6627869

Efeitos

- Estabilização do tornozelo, proteção e compressão.
- Melhor propriocepção.

Indicações

- Entorses e contusões.
- Fibromialgia.
- Derrame e edema causados por artrose e artrite.
- Irritação pós-operatório e pós-trauma.



16 Comprimento
cm

B Bilateral





TECIDO FINO E LEVE




COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



ELEVADA RESPIRABILIDADE



SUPORTE TERAPÊUTICO

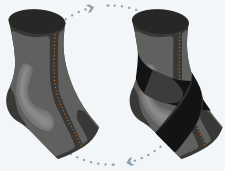

SUPORTE

EVOLUTIONAL

3 graus de estabilização




2 almofadas viscoelásticas para a redistribuição da compressão e um efeito micro-massagem.

Permite o controlo adequado e os pontos de alívio aplicam um efeito de micro-massagem que promove a reabsorção de edema durante o movimento do pé.

Elastic strap

Rigid strap

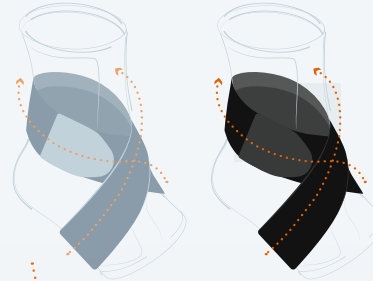

Inclui 2 bandas com diferentes níveis de rigidez para um sistema de estabilização em figura 8.

A banda rígida confere estabilização e proteção e a banda elástica ajuda a controlar o movimento do tornozelo quando ativo.

Extremidades reforçadas para uma adaptação anatómica, prolongando assim a vida útil do produto.



Suporte de ombro elástico funcional




TAMANHOS cm	CNP
1 22-26	6627976
2 26-31	6627984
3 31-37	6627992
4 37-44	6628008
5 44-51	6628016

• Efeitos

- Estabilização, proteção e compressão do ombro.
- Efeito antigravitacional que alivia a pressão nas articulações dissipando a tensão muscular.
- Melhor propriocepção.

• Indicações

- Tensão muscular e contusões.
- Estiramentos e roturas musculares.
- Entorses e subluxação.
- Fibromialgia.
- Artrose.
- Irritação pós-operatório e pós-trauma.

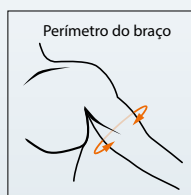

35
cm Altura

B:B Bilateral





TECIDO FINO E LEVE



COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



ELEVADA RESPIRABILIDADE



SUPORTE TERAPÊUTICO



Inclui 2 bandas com sistema de estabilização cruzada para controlar a posição da cabeça umeral na cavidade glenóide.

Banda de ajuste duplo para regulação de tensão e fácil adaptação.

Além disso, possui um protetor na zona da axila para maior conforto.

Extremidades reforçadas para uma adaptação anatômica, prolongando assim a vida útil do produto.



Cotoveleira elástica funcional



TAMANHOS cm	CNP
1 21-23	6627695
2 23-25	6627711
3 25-27	6627729
4 27-29	6627737
5 29-31	6627745

• Efeitos

- Pressão na articulação do cotovelo.
- Melhor propriocepção.

• Indicações

- Epicondilite e epitrocleíte.
- Entorses e contusões.
- Fibromialgia.
- Derrame e edema causados por artrose e artrite.
- Irritação pós-operatório e pós-trauma.

Perímetro do cotovelo



21 Comprimento
cm

B Bilateral





TECIDO FINO E LEVE




COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



ELEVADA RESPIRABILIDADE



SUPORTE TERAPÊUTICO

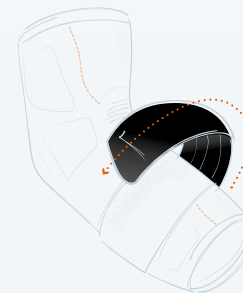

Banda semirrígida para estabilização individualizada e progressiva.

Inclui 2 almofadas viscoelásticas para redistribuição da pressão.

Permite um controlo adequado e os pontos de alívio aplicam um efeito de micro-massagem.

Interior sem costuras para uso confortável, sem atritos.



Pulso elástico funcional



TAMANHOS cm	CNP
1 14-15	6627596
2 15-16	6627604
3 16-17	6627612
4 17-19	6627679
5 19-21	6627687

Efeitos

- Estabilização, proteção e compressão do pulso.
- Melhor propriocepção.

Indicações


- Síndrome do túnel cárpico.
- Derrame e edema causados por artrose e artrite.
- Fibromialgia.
- Entorses e contusões.
- Irritação pós-operatório e pós-trauma.

Perímetro do pulso



17 Comprimento
cm

B:B Bilateral

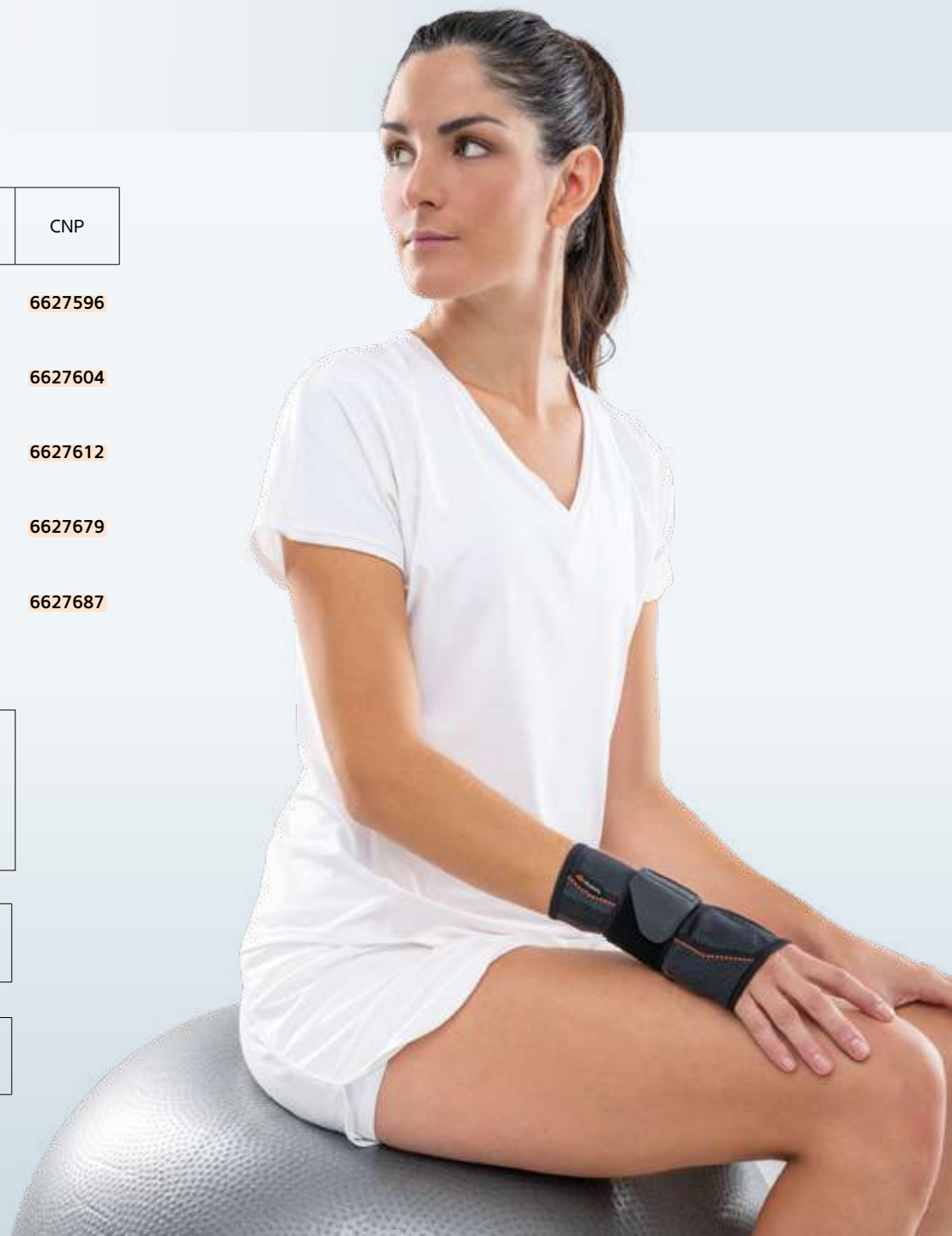



TECIDO FINO E LEVE




COMPRESSÃO MULTI-DIRECIONAL



ELEVADA RESPIRABILIDADE




SUPORE TERAPÊUTICO

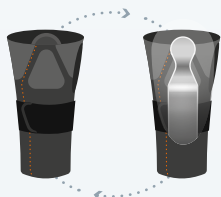

SUPORE

EVOLUTIVO

3 graus de estabilização

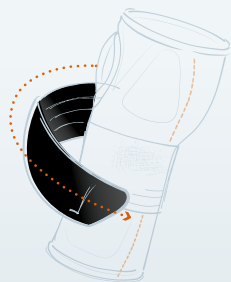

Banda semirrígida para estabilização individualizada e progressiva.

Interior **sem costuras** para uso confortável, sem atritos.



Tala palmar rígida removível em alumínio maleável.

Oferece uma fixação e estabilização adequadas das articulações do pulso.



Visão geral da gama



TGO481

Coxa elástica funcional

TAMANHOS | cm

- 1 : 40-44
- 2 : 44-48
- 3 : 48-52
- 4 : 52-57
- 5 : 57-62

SUPOORTE

EVOLUTIVO



TGO484

Perneira elástica funcional

TAMANHOS | cm

- 1 : 27-29
- 2 : 29-32
- 3 : 32-36
- 4 : 36-40
- 5 : 40-45

SUPOORTE

EVOLUTIVO



TGO480

Joelheira elástica funcional com barras laterais

TAMANHOS | cm

- 1 : A: 41-44
B: 31-34
- 2 : A: 44-47
B: 34-37
- 3 : A: 47-50
B: 37-40
- 4 : A: 50-53
B: 40-43
- 5 : A: 53-56
B: 43-46

SUPOORTE

EVOLUTIVO



TGO487

Joelheira elástica funcional com articulações

TAMANHOS | cm

- 1 : A: 39-42
B: 29-32
- 2 : A: 42-45
B: 32-35
- 3 : A: 47-50
B: 37-40
- 4 : A: 48-51
B: 38-41
- 5 : A: 51-54
B: 41-44

SUPOORTE

EVOLUTIVO



TGO490

Pé elástico funcional

TAMANHOS | cm

- 1 | 19-21
- 2 | 21-23
- 3 | 23-25
- 4 | 25-27
- 5 | 27-29



TGO330

Suporte de ombro elástico funcional

TAMANHOS | cm

- 1 | 22-26
- 2 | 26-31
- 3 | 31-37
- 4 | 37-44
- 5 | 44-51



TGO340

Cotoveleira elástica funcional

TAMANHOS | cm

- 1 | 21-23
- 2 | 23-25
- 3 | 25-27
- 4 | 27-29
- 5 | 29-31



TGO350

Pulso elástico funcional

TAMANHOS | cm

- 1 | 14-15
- 2 | 15-16
- 3 | 16-17
- 4 | 17-19
- 5 | 19-21



Suportes de marketing



Ref.: CAT#TGOI

Catálogo
Thera Go®
26 x 21 cm



EMBALAGEM

Elemento de
comunicação
em diversos formatos

Ref.: EXP-THG

Expositor multi-
produto
150 x 40 cm







DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EM PORTUGAL

INTERORTO – Artigos Ortopédicos, Lda.

Estrada Nacional 249-3,
Cacem Park, 88, Armazém 10
Alto da Bela Vista - 2735-307, Cacém)
Tel.: 214 262 939 - Fax: 214 264 912
E-mail: geral@interorto.pt · www.interorto.pt



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3
46185 La Pobla de Vallbona - Valencia (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00
E-mail: orto@orliman.com · www.orliman.com

CAT#TGOI

EDIÇÃO: 2020-03

